

CM-2.4


Persönliches Kommunikationssystem



»CM-2.4« – die direkte Verbindung zwischen dem Wort und klarem Verstehen.

»CM-2.4« erweitert die Grenzen guten Verstehens – ein klares Plus für Hörgeräteträger und alle, die auch in schwieriger akustischer Umgebung selbstsicher mitreden möchten.

HUMANTECHNIK – Ihr Partner für audilogische Produkte

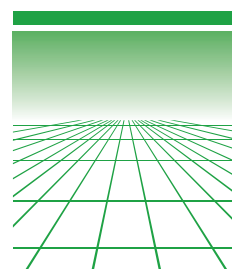



Immer »ganz Ohr«: auf Veranstaltungen, am Arbeitsplatz oder in belebter Umgebung.



Das »CM-2.4-Set« im Softkoffer umfasst neben CM-2.4-Sender und -Empfänger: 1 Steckmikrofon, 1 In-Ear-Ohrhörer, 1 Kopfhörer, 1 Teleschlinge, 2 Gürtelclips, 2 Trageschlingen, 2 USB-Ladekabel, 2 x USB Netzteile

Mit der drahtlosen digitalen Übertragung der Audiosignale auf dem 2,4-GHz-Frequenzband verwendet das Kommunikationssystem »CM-2.4« die derzeit hochwertigste Funk-Übertragungstechnik – das Ergebnis: kristallklarer Klang und gegenüber herkömmlichen Verfahren deutlich bessere Qualität.

Klein, kompakt und funktional-elegant im Design überzeugt »CM-2.4«, das Kommunikationssystem für schwierige akustische Situationen, vom ersten Moment an mit beeindruckender Klangqualität und hoher Sprachverständlichkeit.

Komfortmerkmale für mehr Anwendungs-Flexibilität

Das persönliche Kommunikationssystem »CM-2.4« besteht aus einem Sende- und einem Empfangsgerät.

Der Sender, der standardmäßig mit einem Steckmikrofon ausgestattet wird, ist darüber hinaus auch für den Anschluss weiterer Mikrofonausführungen ausgelegt.

Der Empfänger erlaubt den Anschluss unterschiedlichster Hörkomponenten. Im Standard-Lieferumfang sind ein In-Ear-Ohrhörer, ein Kopfhörer und eine Teleschlinge enthalten. Letztere ermöglicht bei aktivierter T-Spule das sogenannte induktive Hören über die eigenen Hörgeräte oder CI-Systeme.

Top-Leistung, »spielend leicht« aktiviert.

Von allen Komfortmerkmalen der Anwendung sticht vor allem das didaktisch gut umgesetzte Konzept für eine einfache und damit fehlersichere Bedienung heraus: Mit dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit. Die menügeführte Bedienung erfolgt über nur drei Tasten, und ein LCD-Display zeigt den jeweiligen Status an.

Umschalten auf klares Verstehen

Überall dort, wo es in unruhiger Umgebung auf jedes Wort ankommt, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz, heißt es mit »CM-2.4«: umschalten auf klares Verstehen und sofort selbstsicher mitreden.

Technische Daten	
Abmessungen:	85 x 50 x 15 mm (H x B x T)
Gewicht:	66 g
Funkfrequenzart:	ISM 2403 - 2480 MHz
Übertragungsart:	ISM 2,4 GHz FSK Modulation mit Frequenzhopping
Sendeleistung:	Maximum 10 mW
RX-Empfindlichkeit:	-95 dBm
Verzögerung:	< 30 ms
Kanalabstand:	1 MHz
Datenrate:	2 Mbps
Stromversorgung:	LI-ION 3,7 V / 1100 mAh
Betriebszeit:	bis zu 20 h pro Ladung
Reichweite:	bis 300 m



HUMANTECHNIK

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 7621 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com
E-Mail: info@humantechnik.com

Ihr Fachhandel berät Sie umfassend und kompetent